

# Deling af REDCap instrumenter


Der opstår ofte et ønske om at kunne importere et instrument fra et andet REDCap projekt til en ny projektdatabase, istedet for at designe den igen fra bunden.

Dette kan gøres via datadictionary, men der er en endnu lettere måde, som gennemgås her

# Eksporter instrumenter fra 'donor' projektet – del 1

Der er to forskellige måder at **eksportere** instrumenter på, afhængigt af om donorprojektet er under udvikling (development), eller om det allerede er i produktion. Begge muligheder kræver at den der eksporterer har design rettigheder på databasen



**Produktion:** For at få adgang til listen over projektets instrumenter, skal man under project setup klikke allernederst på 'Online Designer' knappen under afsnittet 'Modify your datacollection instruments in Draft Mode'



Optional

### Modify your data collection instruments in Draft Mode

Once in production, you may still modify or add fields to the project, if you desire. This may be done by either using the Online Designer (online method) or by uploading a Data Dictionary (offline method), in which you may use either method or both. Quick links: [Download PDF of all data collection instruments](#) OR [Download the current Data Dictionary](#)


Go to  Online Designer or  Data Dictionary

**Development:** Listen over projektets instrumenter er tilgængeligt via den normale adgang til Online Designeren

# Eksporter instrumenter fra 'donor' projektet – del 2

Fra oversigten over donorprojektets instrumenter klikkes på 'Choose Action' knappen ud for et instrument der ønskes eksporteret. På dropdown menuen klikkes på 'Download instrument ZIP'

Der åbner nu en dialogboks hvor man kan vælge hvor den downloadede fil skal gemmes, og hvad den skal kaldes. Gem filen et sted hvor du kan finde den. Bemærk, at det er en zip-fil der downloades, men du skal IKKE begynde at pakke den ud. Det er selve zip-filen der skal importeres i modtagerprojektet i næste skridt


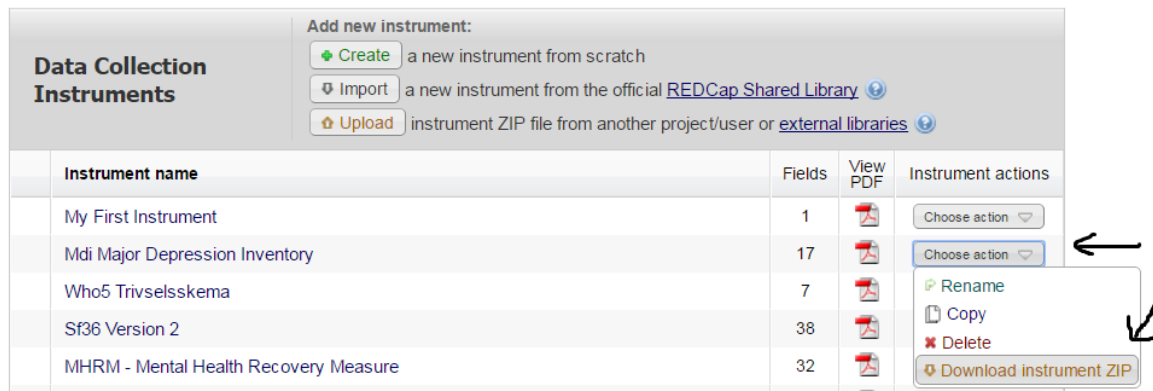


The screenshot shows the 'Data Collection Instruments' interface. At the top, there are three buttons: 'Create' (a new instrument from scratch), 'Import' (a new instrument from the official REDCap Shared Library), and 'Upload' (instrument ZIP file from another project/user or external libraries). Below this is a table with columns: 'Instrument name', 'Fields', 'View PDF', and 'Instrument actions'. The table lists five instruments: 'My First Instrument' (1 field), 'Mdi Major Depression Inventory' (17 fields), 'Who5 Trivselsskema' (7 fields), 'Sf36 Version 2' (38 fields), and 'MHRM - Mental Health Recovery Measure' (32 fields). A dropdown menu is open for the 'Mdi Major Depression Inventory' row, showing options: 'Rename', 'Copy', 'Delete', and 'Download instrument ZIP'. A black arrow points to the 'Download instrument ZIP' option.

Instrument name	Fields	View PDF	Instrument actions
My First Instrument	1		Choose action ▾
Mdi Major Depression Inventory	17		Choose action ▾ Rename Copy Delete Download instrument ZIP
Who5 Trivselsskema	7		
Sf36 Version 2	38		
MHRM - Mental Health Recovery Measure	32		

# Importer instrumenter i modtagerprojektet

Når man har downloaded én eller flere instrumenter fra donor projektet, åbnes modtagerprojektet. Åben Online Designeren. Øverst i Online Designeren findes en knap der hedder 'Upload instrument ZIP file from another project/user'. Den åbner en dialog hvor man kan vælge en instrument ZIP på sin computer og uploade den til det nye projekt. Det nye instrument vil nu blive føjet til de eksisterende.

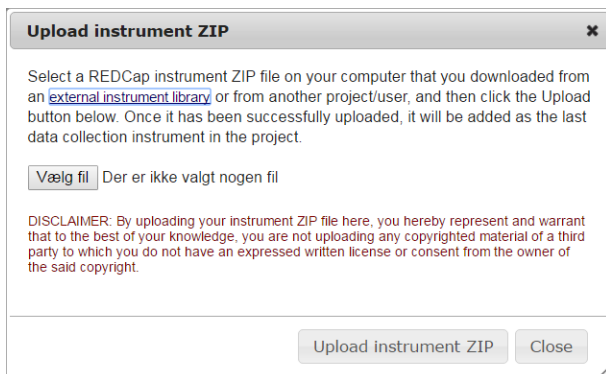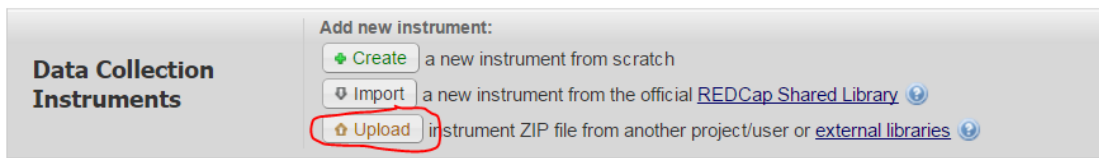

Hvis det uploadede instrument indeholder felter med variabelnavne der allerede bliver brugt i et af de eksisterende instrumenter, er REDCap nødt til at omdøbe disse. Dette gøres ved at tilføje et suffix til dem. Det vil blive annonceret i givet fald. Man kan så selv efterfølgende omdøbe sine variable via online designeren